



Guldmann™

Harnais et accessoires
de levage



Votre partenaire en logistique:
moyens de réhabilitation
équipement médical
aide à domicile

Echallens
021 881 13 13
www.a-reha.ch



Harnais et accessoires de levage

Les harnais et autres accessoires de levage sont des éléments clés de la gamme étendue de produits de levage, de transfert, de manutention, d'entraînement, de mobilisation de personnes Guldmann.

Les harnais sont spécialement conçus pour permettre au soignant de soutenir l'utilisateur de façon pratique, sécurisée et sans effort lors du levage et du transfert du patient d'un point à un autre.

Tous les harnais Guldmann sont conçus pour être utilisés de façon confortable, digne et simple avec les systèmes mobiles et les modules de levage sur rail, et sont parfaits pour le transfert de personnes de leur lit à leur fauteuil (et vice versa) ainsi que pour la manutention en positions assise et couchée si nécessaire.

Les harnais Guldmann sont spécialement conçus pour le levage et le transfert d'utilisateurs présentant

- des capacités différentes à participer activement au transfert
- des degrés de contrôle du corps et de force musculaire différents
- des degrés de mobilité différents
- des amputations simples ou doubles
- des besoins spécifiques

et pour des adultes et des enfants de tailles et de poids très différents.

Ils peuvent également faire partie intégrante de programmes de formation et d'activités pour les utilisateurs. Tous les harnais Guldmann sont disponibles en version lavable en machine ou en version jetable pour assurer la meilleure hygiène possible.


Accessoires

En plus des harnais, Guldmann propose une large gamme d'accessoires de levage spécialement conçus pour assurer une plus grande mobilité à l'utilisateur et au soignant avec moins d'effort. Par ailleurs, ils permettent au soignant de fournir la meilleure aide possible à l'utilisateur tout en travaillant dans des positions ergonomiques.


Matériaux




*Polypropylène
(Jetable)*

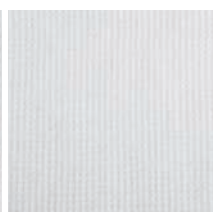


*Polyester/Coton
(Bariatrie)*

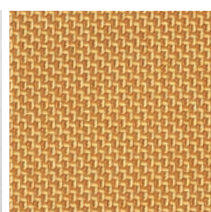

Polyester

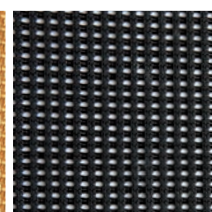

*Filet
Polyester*

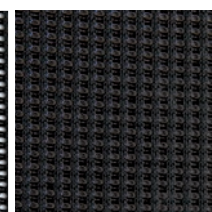

*Maille de filet
espacée
(Confort)*

Harnais ABC

ACTIVE

BASIC

CUSTOM

Harnais		Enfant 4 - 6	Enfant 6 - 10	Enfant 10 - 14	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Active Micro	polyester				284031	284041	284051	284061	284071	284081	
Active Micro Plus	polyester	281001	281011	281021	281531	281541	281551	281561	281571	281581	
Active Trainer	polyester		283011	283021	283031	283041	283051	283061	283071	283081	
Basic Basic	polyester	270001	270011	270021	270031	270041	270051	270061	270071	270081	270091 ^{y)}
Basic Basic	filet	270102	270112	270122	270133	270143	270153	270163	270173	270183	
Basic Low	polyester				271031	271041	271051	271061	271071	271081	
Basic Low	filet				271133	271143	271153	271163	271173	271183	
Basic High	polyester	272001	272011	272021	272031	272041	272051	272061	272071	272081	272091 ^{y)}
Basic High	filet	272102	272112	272122	272133	272143	272153	272163	272173	272183	
Basic Shell	filet				275032	275042	275052	275062	275072		
Basic Hammock	polyester				274031	274041	274051	274061	274071		
Sit-On	filet	295001	295011		295031	295041	295051	295061	295071		
Sit-On High	filet	296001	296011		296031	296041	296051	296061	296071		
Sit-On Comfort	Maille de filet espacée	293001	293011		293031	293041	293051	293061	293071		
Sit-On Comfort High	Maille de filet espacée	294001	294011		294031	294041	294051	294061	294071		
Custom Amputee	polyester				290031	290041	290051	290061	290071		
Active Vest Kids ^{xx)}	polyester		283111	283121 ^{xxx)}							
Vest for Standing Shell ^{xx)}	polyester		283511	283521 ^{xxx)}	283531						

Capacité de levage maximale pour tous les harnais ABC Guldmann: 255 kg


x) Les harnais Basic Basic et Basic High XXXL peuvent lever jusqu'à 500 kg

xx) Capacité de levage maximale pour les Active Vest Enfants / Vest for standing shell : 100 kg

xxx) Active Vest Kids / Vest for standing shell : enfants 10-16

Comment choisir la taille d'un harnais ?

	Enfant 4 - 6	Enfant 6 - 10	Enfant 10 - 14	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
L	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58

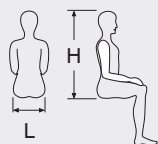

Toutes les dimensions sont en cm



Lavage normal à la température indiquée




N'utilisez pas d'agent de blanchiment



Séchage en tambour à faible température



Ne pas repasser

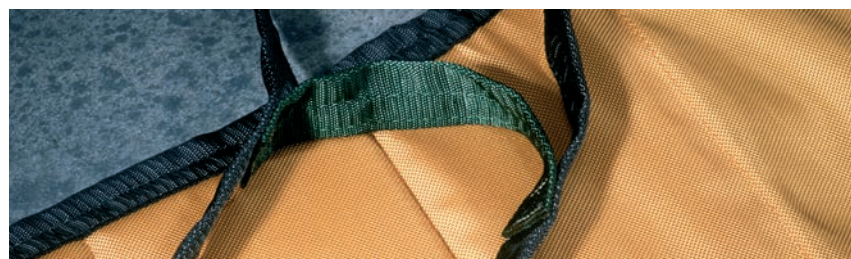

Les boucles de couleur assurent la symétrie lors du lavage et facilitent en même temps la communication relative au lavage

Harnais ABC



① **Boucles de couleur**
Les boucles de couleur assurent la symétrie lors du levage

② **Matériau**
Polyester anti-salissure caractérisé par sa résistance et son élasticité

③ **Passants**
Il est possible d'utiliser des sangles complémentaires

④ **Rembourrage aux jambes**
Tous les harnais avec prise séparée aux jambes possèdent un rembourrage au niveau des jambes. Facile à mettre en place – plus doux sur la peau

⑤ **Étiquette d'inscription des inspections**

⑥ **Étiquette d'utilisation**
Indique toutes les informations utiles relatives à l'utilisation et à l'entretien du harnais

⑦ **Étiquette avec indication de la taille**
Permet de trouver facilement et simplement la bonne taille de harnais

⑧ **Rembourrage du dos**
Pour un confort supplémentaire sur les modèles ayant une surface réduite dans le dos

⑨ **Poche de positionnement**
Tous les harnais Basic sont fournis avec une poche pour faciliter le positionnement correct du harnais

Adapté
Des harnais plus adaptés et une plus grande variété de tailles disponibles pour chacun pour plus de confort et de sécurité

Résistance
Capacité de levage maximale de 255 kg à 500 kg

Lavage
Facile à entretenir, le harnais peut être lavé à 80°C et séché à une température maximale de 50°C



Harnais ABC – Active



1
Active Trainer

Fonction

Fournit un soutien autour de la poitrine et des épaules. Des sangles jambières détachables confèrent un soutien autour de la zone des hanches et empêchent l'utilisateur de glisser hors du harnais.

Approprié pour

- personnes avec un équilibre corporel réduit, capables toutefois de s'appuyer sur leurs jambes
- entraînement à la marche
- soutien en position debout
- premières mobilisations.

..... 2830xx



2
Active Micro

Fonction

Soutient la partie supérieure du corps (depuis le haut du pelvis jusque sous les épaules), les côtés du torse et la partie supérieure des cuisses. La ceinture possède une fonction de resserage pour ajuster le soutien autour du corps.

Approprié pour

- levage des personnes qui ont le contrôle de leur tête avec cependant une force musculaire réduite dans le corps en général, au niveau des articulations des hanches et des jambes
- situations dans lesquelles le harnais doit être mis en place et retiré facilement
- levage d'une personne se trouvant ou devant être placée en position assise
- levage d'une personne se trouvant ou devant être placée en position semi-allongée
- un coussin de cou sera utilisé pour soutenir la tête
- situations où une grande ouverture au niveau du bassin est nécessaire, comme pour la toilette.

..... 2840xx



3
Active Micro Plus

Fonction

Supporte la partie supérieure du corps (du bassin jusqu'au dessous des épaules) au niveau de la poitrine et de la partie supérieure des cuisses. La sangle de sécurité peut être réglée.

Approprié pour

- le levage de personnes pouvant contrôler leur tête, mais présentant une force musculaire réduite dans la partie supérieure du corps et au-dessus de l'articulation de la hanche et des jambes
- les situations dans lesquelles le harnais doit être installé et retiré facilement
- le levage de personnes se trouvant ou à placer en position assise
- les situations nécessitant une grande ouverture en bas, par exemple pour la toilette et l'hygiène.

..... 2815xx



Harnais ABC – Basic

4



5



6



4

Basic Basic

Fonction

Soutient le corps entier à l'exclusion de la tête.

Approprié pour

• levage de personnes qui ont le contrôle de leur tête avec ou sans contrôle de leur corps • levage de personnes se trouvant ou à placer en position assise ou semi-assise (lit et fauteuil, etc.) • levages et transferts à partir du lit / fauteuil.

..... 270xxx

5

Basic Low

Fonction

Soutient le corps jusqu'à hauteur des épaules.

Approprié pour

• levage de personnes qui ont le contrôle de leur tête et de leur corps • levage de personnes se trouvant ou à placer en position assise (fauteuil et lit, etc.) • levages et transferts à partir du lit / fauteuil.

..... 271xxx

6

Basic High

Fonction

Soutient le corps entier, y compris la tête.

Approprié pour

• levage de personnes qui ont un faible contrôle de leur tête et de leur corps • levage de personnes se trouvant ou à placer en position allongée (lit et sol, etc.) • levage de personnes se trouvant ou à placer en position assise • levages et transferts à partir du lit / fauteuil et du sol.

..... 272xxx



◀ Regarder la vidéo d'utilisation

Harnais ABC – Basic



7
Basic Shell

Fonction

Soutient l'ensemble du corps et la tête, mais permet de laisser les bras en dehors du harnais.

Approprié pour

- levage des personnes qui ont un faible contrôle de leur tête et de leur corps
- levage de la position allongée et inversement (lit et sol etc)
- levage depuis la position assise et inversement
- convient pour une utilisation du harnais en fauteuil.

..... 2750xx



8
Basic Hammock

Fonction

Soutient tout le corps, à l'exception de la tête. S'il est nécessaire de soutenir la tête, un coussin de cou peut être utilisé avec le harnais. Procure un soutien supplémentaire au niveau des hanches et des cuisses. Peut s'utiliser séparément pour chaque jambe ou pour les deux en même temps ; procure également un bon soutien pour les amputés (les utilisateurs amputés **doivent** être évalués avant de pouvoir utiliser ce harnais).

Approprié pour

- le levage de personnes ayant un contrôle limité de leur corps
- le levage de personnes se trouvant ou à placer en position allongée (lit, sol, etc.)
- le levage de personnes se trouvant ou à placer en position assise
- les personnes ayant besoin d'un soutien supplémentaire au niveau des hanches et des cuisses.

..... 2740xx



Harnais ABC – Custom

9



10



11



9

Sit-On

Fonction

Soutien des jambes et du dos. L'utilisateur est assis dans le harnais.

Approprié pour

Personnes qui séjournent dans le harnais pendant de longues périodes ou qui sont immobilisées en raison d'un poids élevé ou d'un fauteuil spécial.

Autres caractéristiques

- aide à réduire le risque de glissement hors du fauteuil
- le matériau a la particularité d'éviter la génération de chaleur entre le corps et le harnais
- le harnais est utilisé sur une personne allongée, mais il peut également être utilisé pour lever une personne se trouvant en position assise vers le lit ou un fauteuil. Déconseillé aux personnes souffrant d'escarres.

..... 2950xx

10

Sit-On High

Fonction

Soutient les jambes, le dos et la tête. L'utilisateur est assis dans le harnais.

Approprié pour

Personnes qui séjournent dans le harnais pendant de longues périodes en raison d'un poids élevé ou d'un fauteuil spécial.

Autres caractéristiques

- aide à réduire le risque de glissement hors du fauteuil
- le matériau évite la génération de chaleur entre le corps et le harnais
- le harnais est adapté sur la personne.

..... 2960xx

11

Custom Amputee

Fonction

Soutient le corps entier jusqu'à hauteur des épaules et de la région pelvienne.

Approprié pour

- levage des personnes avec amputations simples ou doubles (au-dessus du genou)
- levage des personnes avec amputations doubles et hautes
- levage de personnes en position allongée un coussin de cou sera utilisé pour soutenir la tête.

..... 2900xx



◀ Regarder la vidéo d'utilisation

Harnais ABC – Custom



12 Sit-On Comfort

Fonction

Soutient les jambes et le dos. L'utilisateur est assis dans le harnais. Le harnais est conçu pour empêcher toute rotation inverse des jambes lors du levage. Il procure un grand confort grâce à son tissu très doux en maille de filet espacée.

Approprié pour

Personnes qui séjournent dans le harnais pendant de longues périodes en privilégiant le confort du patient grâce à un tissu doux de haute qualité.

Autres caractéristiques

- aide à réduire le risque de glissement hors du fauteuil
- le matériau a la particularité d'éviter la génération de chaleur entre le corps et le harnais
- le harnais est utilisé sur une personne allongée, mais il peut également être utilisé pour lever une personne se trouvant en position assise vers le lit ou un fauteuil. Déconseillé aux personnes souffrant d'escarres.

..... 2930xx

13 Sit-On Comfort High

Fonction

Soutient les jambes, le dos et la tête. L'appui-tête est ajustable et se replie quand le patient est en position assise lors du levage. Le harnais est conçu pour empêcher toute rotation inverse des jambes lors du levage. Il procure un grand confort grâce à son tissu très doux en maille de filet espacée.

Approprié pour

Personnes qui séjournent dans le harnais pendant de longues périodes en privilégiant le confort du patient grâce à un tissu doux de haute qualité.

Autres caractéristiques

- aide à réduire le risque de glissement hors du fauteuil
- le matériau évite la génération de chaleur entre le corps et le harnais
- le harnais est adapté sur la personne.

..... 2940xx

Harnais ABC – Enfants

14



15



16



14

Basic Basic – Enfants

Fonction

Soutient le corps entier à l'exclusion de la tête. La ceinture intérieure vient parfaire le maintien du corps.

Approprié pour

- levage des enfants ayant un contrôle de leur tête et avec ou sans contrôle de leur corps
- levage de personnes se trouvant ou à placer en position assise ou semi-assise (lit et fauteuil, etc.).

..... 270xxx

15

Basic High – Enfants

Fonction

Soutient le corps entier, y compris la tête. La ceinture intérieure vient parfaire le maintien du corps.

Approprié pour

- levage d'enfants ayant un léger contrôle de la tête et du corps
- levage de personnes se trouvant ou à placer en position allongée (lit, changement de banc et sol, etc.)
- levage de personnes se trouvant ou à placer en position assise.

..... 272xxx

16

Active Vest – Enfants

Fonction

Soutient le corps et le pelvis. Un ajustement de la largeur est possible.

Approprié pour

- enfants avec un équilibre corporel réduit
- exercices de marche
- soutient la position debout et la position verticale
- activités ludiques.

..... 2831xx

Harnais ABC – Enfants

17



18



19



17

Sit-On Comfort – Enfants

Fonction

Soutient les jambes et le dos. L'utilisateur est assis dans le harnais. Le harnais est conçu pour empêcher toute rotation inverse des jambes lors du levage. Il procure un grand confort grâce à son tissu très doux en maille de filet espacée.

Approprié pour

Enfants immobilisés dans le harnais pendant de longues périodes en raison d'un poids élevé, d'un fauteuil spécial, ou nécessitant un levage régulier.

Autres caractéristiques

- aide à prévenir le risque de glissement hors du harnais
- le matériau prévient la génération de chaleur entre le corps et le harnais
- celui-ci est ajusté sur l'enfant en position allongée et peut être utilisé en cas de levage d'une position assise sur lit ou fauteuil.

..... 2930xx

18

Sit-On Comfort High – Enfants

Fonction

Soutient les jambes, le dos et la tête. L'appui-tête est ajustable et se replie quand le patient est en position assise lors du levage. Le harnais est conçu pour empêcher toute rotation inverse des jambes lors du levage. Il procure un grand confort grâce à son tissu très doux en maille de filet espacée.

Approprié pour

Enfants immobilisés dans le harnais pendant de longues périodes en raison d'un poids élevé, d'un fauteuil spécial.

Autres caractéristiques

- aide à prévenir le risque de glissement hors du harnais
- le matériau prévient la génération de chaleur entre le corps et le harnais
- celui-ci est ajusté sur l'enfant en position allongée et peut être utilisé en cas de levage depuis une position assise et inversement.

..... 2940xx

19

Vest for Standing Shell – Enfants

Fonction

Soutient la tête et le dos.

Approprié pour

- levage de l'enfant de la position assise à la position debout utilisée avec une coque de maintien pour l'assistance sur un lève-personne ou une table d'examen.

..... 2835xx



20



20

Basic High Bariatric, 500 kg

Fonction

Soutient le corps entier, y compris la tête.

Approprié pour

- levage de personnes ayant un faible contrôle de leur tête et de leur corps
- levage de personnes se trouvant ou à placer en position allongée (lit et sol, etc.)
- levage de personnes se trouvant ou à placer en position assise
- levages et transferts à partir du lit / fauteuil et du sol.

4XL standard 2720914

Harnais – Bariatrie



21



22



23



21

Twin Turner Bariatric

Est utilisé pour tourner le patient dans une position latérale sans retirer la sangle. Permet le positionnement du harnais sous le patient sans avoir besoin de le déplacer. Ce harnais comporte de plus petites surfaces de matériau permettant l'accès à la peau du patient pour un soin ou un traitement.

..... 28760

22

Harnais de jambe

Utilisé quand les jambes ont besoin d'être soulevées et soutenues, dans le cadre de l'habillement, de la toilette, pour mettre des bas thérapeutiques, et dans le cadre de soins.

Par boîtes de 10 harnais.
..... 28650

23

Harnais de repositionnement, 500 kg

Harnais faisant partie du linge de lit du patient : il est positionné sous le patient, prêt à être utilisé pour les soins. Adapté pour tourner le patient sur le côté et le repositionner dans le lit, asseoir vers l'avant le tronc et la tête, transferts en position allongée sur le dos vers d'autres surfaces comme les lits, les supports allongés, et levage complet hors du lit en position allongée. Par boîtes de 5 harnais.

..... 284656

Harnais – Bariatrie

24



24

Gait Trainer Bariatric, 500 kg

Fonction

Soutient le pubis et le pannus.

Approprié pour

Patients en bariatrie. Soutiendra le patient dans la position debout, pour un confort et un soutien optimum.

.....283100



Harnais jetables

25



25

Harnais jetable High II, 205 kg

Fonction

Soutient le corps entier y compris la tête. Harnais à usage unique résistant à l'eau. Peut être utilisé dans le cadre du contrôle des infections. Même conception que le harnais Basic High Guldmann.

Approprié pour

- levage des personnes en possession du contrôle de leur corps • levage à partir et vers une position allongée (lit, sol, etc)
 - levage à partir et vers une position assise.
- Par boîtes de 10 harnais.

Matériau

Polypropylène	
XS/S	283641
S/M	283651
M/L	283661
L/XL	283671
XL/XXL	283681

26

Harnais jetable High Bariatric, 350 kg

Fonction

Soutient le corps entier y compris la tête. Harnais à usage unique résistant à l'eau. Peut être utilisé dans le cadre du contrôle des infections. Même conception que le harnais Basic High Guldmann.

Approprié pour

- levage des personnes en possession du contrôle de leur corps • levage à partir et vers une position allongée (lit, sol, etc)
 - levage à partir et vers une position assise.
- Par boîtes de 10 harnais.

Matériau

Polyester/coton	
L/XL	283672
XL/XXL	283682
XXL/XXXL	283692

27

Harnais jetable High II – Enfants, 205 kg

Fonction

Soutient le corps entier y compris la tête. Harnais à usage unique résistant à l'eau. Peut être utilisé dans le cadre du contrôle des infections. Même conception que le harnais Basic High Guldmann.

Approprié pour

- levage d'enfants n'ayant pas de contrôle de leur tête ni de leur corps • levage à partir et vers une position allongée (lit, sol, etc)
 - levage à partir et vers une position assise.
- Par boîtes de 10 harnais.

Matériau

Polypropylène	
Kids 6-10	283611



Harnais jetables

28



28

Harnais de repositionnement jetable 500 kg

Fonction

Harnais à utiliser comme linge de lit du patient ; à laisser en place sous le patient, prêt à l'emploi pour des actes de soins. Harnais à usage unique, personnel et tolérant à l'eau. A jeter après usage. Bénéfique dans le cadre d'un programme de contrôle d'infection. Même design que le harnais Guldmann repositionnable.

Approprié pour

Tourner et positionner le patient latéralement dans le lit, asseoir vers l'avant le tronc et la tête, transferts en position allongée sur le dos vers d'autres surfaces comme les lits, les supports allongés, et levage complet hors du lit en position allongée.
Par boîtes de 10 harnais.

Matériau

Polyester
..... 284655

29



29

Jetable Harnais horizontal standard 350 kg

Fonction

Supports the whole body.

Approprié pour

Levage d'un patient en position horizontale.
Par boîtes de 10 harnais.

Matériau

Polyester
..... 284631

Harnais jetables

30

Twin Turner II jetable

Fonction

Est utilisé pour tourner le patient dans une position latérale comme par exemple dans le cadre de la toilette. Harnais à usage unique résistant à l'eau. Permet le positionnement du harnais sous le patient sans avoir besoin de le déplacer. Ce harnais comporte de plus petites surfaces de matériau permettant l'accès à la peau du patient pour un soin ou un traitement. Même conception que le Turner Guldmann.

Par boîtes de 10 harnais.

Matériau

Polypropylène

Regular 287501

Large 287511

31

Harnais de jambe jetable

Fonction

Utilisé pour le levage et le maintien des jambes. Possibles activités d'habillage, de pose de bas thérapeutiques, accès pour l'hygiène. Peut être utilisé dans le cadre du contrôle des infections. Même conception que le harnais de jambe Guldmann.

Conditionné par paquets de 10 harnais.

Matériau

Polypropylène

..... 286501

32

Jetable

Harnais multi support

Fonction

Permet le levage d'une partie du corps, du haut du corps, du bassin, des jambes ou des bras.

Approprié pour

Les situations où une partie du corps doit être levée ou soutenue – par exemple pour placer une console radiologique.

..... 284223





Harnais de rotation et de transfert



33 Harnais de positionnement

Le harnais de positionnement permet de tourner facilement le patient en position latérale sur une table d'opération par exemple. L'utilisation du harnais avec le module de levage évite les frictions avec la peau du patient et améliore l'environnement de travail du personnel soignant.
Harnais de positionnement latéral . . . 284226

Kit de harnais de positionnement:
2 x harnais
2 x harnais multi-support
1 x sangles de maintien
..... 284225

Fonction de rotation et de transfert



35

Harnais de jambe

Utilisé quand les jambes ont besoin d'être soulevées et soutenues, dans le cadre de l'habillement, de la toilette, pour mettre des bas thérapeutiques, et dans le cadre de soins.

Par boîtes de 10 harnais.

..... 28650



36

36

Harnais de repositionnement, 500 kg

Harnais à utiliser comme linge de lit du patient : il est positionné sous le patient, prêt à être utilisé pour les soins. Adapté pour tourner le patient sur le côté et le repositionner dans le lit, assise vers l'avant le tronc et la tête, transferts en position allongée sur le dos vers d'autres surfaces comme les lits, les supports allongés, et levage complet hors du lit en position allongée.

Par boîtes de 10 harnais.

Standard 28465

Court (cf photo) 284653

Net. 284650

Harnais de rotation et de transfert



37
Turner

Permet le positionnement du harnais sous le patient sans avoir besoin de le déplacer. Ce harnais comporte de plus petites surfaces de matériau permettant l'accès à la peau du patient pour un soin ou un traitement.

..... 28700

38
Twin Turner

Est utilisé pour tourner le patient dans une position latérale sans retirer la sangle. Permet le positionnement du harnais sous le patient sans avoir besoin de le déplacer. Ce harnais comporte de plus petites surfaces de matériau permettant l'accès à la peau du patient pour un soin ou un traitement.

Regular 28750

Large 28751

39
Harnais multi support

Fonction

Permet le levage d'une partie du corps, du haut du corps, du bassin, des jambes ou des bras.

Approprié pour

Les situations où une partie du corps doit être levée ou soutenue – par exemple pour placer une console radiologique.

..... 28467



Accessoires de levage

40



41



40

Support allongé pliable, 250 kg avec 2 sangles d'accroche

Conçu pour un levage à l'horizontale en douceur, avec réglage de la balance. Peut être utilisé soit avec un harnais pour support horizontal, soit avec des lanières seules.

- Support allongé avec un drap de levage 28444
- Harnais pour support horizontal 284485
- Ensemble de lanières seules 28448

41

Support allongé pliable, 250 kg

Conçu pour un levage à l'horizontale en douceur, avec réglage de la balance. Peut être utilisé soit avec un harnais pour support horizontal, soit avec des lanières seules.

- Support allongé avec un drap de levage 28445
- Harnais pour support horizontal 284485
- Ensemble de lanières seules 28448

42

Chariot de transport pour support allongé

..... 28443



Accessoires de levage



43



46



47



44



45



48

43
Support allongé, 350 kg
 Support de levage horizontal avec manivelle d'ajustement de la répartition du poids. Peut être utilisé avec le moteur de levage GH3 ou avec un lève-personne mobile Guldmann.
 28456
 Harnais horizontal standard 28463

44
Support allongé, 350 kg
 Support allongé avec 5 positions différentes. Peut être utilisé avec des moteurs de levage GH3 ou un lève-personne mobile Guldmann.
 28466
 Harnais horizontal standard 28463

45
Sangles de levage mortuaire
 Facilite le levage mortuaire. Supporte des corps de grande envergure. Les sangles individuelles facilitent l'accès.
 Standard avec lanières 284640

46
Chaise de piscine inox, 150 kg
 Pour un levage stable en piscine.
 14600

47
Brancard de piscine inox, 150 kg
 Pour un levage stable et horizontal en piscine.
 14610

48
Cintre horizontal Body Scoop, 150 kg
 Cintre horizontal spécialement conçu pour faciliter les nombreux transferts et manutentions que doit effectuer le personnel mortuaire chaque jour.
 28425

Accessoires de levage



49
Peson digital pour module de levage plafonnier ou module de levage mobile
 Peson digital fonctionnant avec piles.

- (A) Capacité de levage maximale. Approuvé pour usage médical . . . 11346
- (B) Capacité de levage maximale. . . 113461

50
Doublures en peau de mouton
 Pour les personnes nécessitant un soutien plus souple des cuisses.
 28315

51
Coussin de cou
 Soutient la tête sans stimuler les réflexes du cou. Pour les personnes sans contrôle du maintien de leur tête.
 28325

52
Rallonges de sangle
 Utiliser pour obtenir des positions assises ou des hauteurs de levage différentes.
Lot de deux pcs.
 20 cm 28470
 30 cm 28472

Options pour les cintres de levage



53
Cintre de levage GH, medium, 350 kg
Pour les personnes utilisant un harnais de levage en tailles M à XXXL.

Fonction
A utiliser pour des levages simples et avec des harnais standards.

..... 550316



54
Cintre de levage GH, small, 350 kg
Pour les personnes utilisant un harnais de levage en taille S.

Fonction
A utiliser pour des levages simples et avec des harnais standards. Ce cintre de levage est recommandé avec des harnais de taille small ou plus petits. Peut s'utiliser avec le harnais Active Micro Plus.

..... 550057




55
Cintre de levage GH, extra-small, 350 kg
Pour les personnes utilisant un harnais de levage en tailles Enfants et XS.

Fonction
A utiliser pour des levages simples et avec des harnais standards. Ce cintre de levage est recommandé avec des harnais pour enfants.

..... 550058

Options pour les cintres de levage

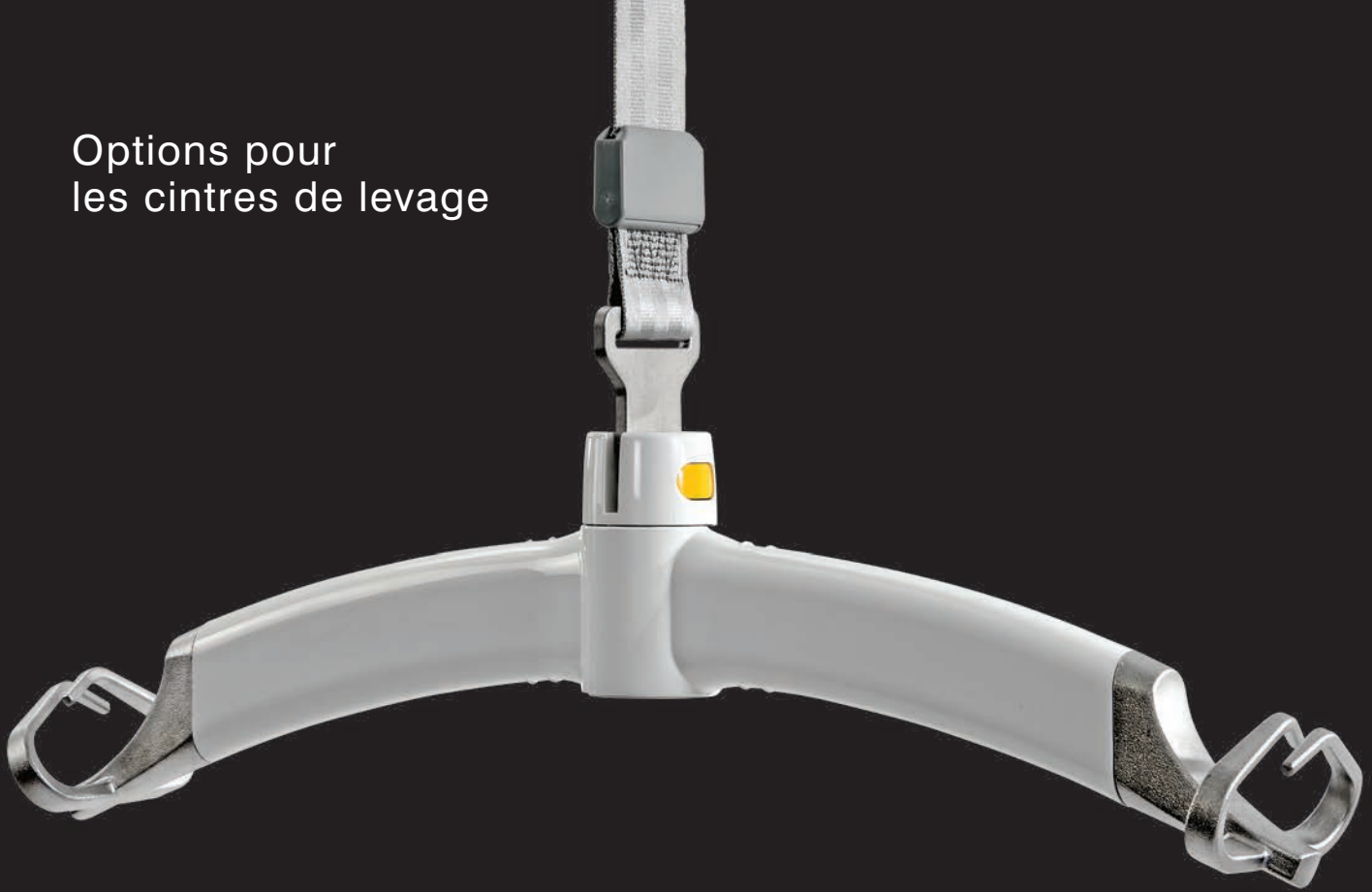

56



56
Cintre de levage GH, 4 points d'accroche, medium, 350 kg

Pour les personnes utilisant un harnais de levage en tailles M à XXXL.

Fonction

A utiliser quand un petit espace est nécessaire entre les 4 points d'accroche et lorsque plusieurs sangles doivent être placées sur le même crochet du cintre.

..... 554258

57



57
Cintre de levage GH, 4 points d'accroche, small, 350 kg

Pour les personnes utilisant un harnais de levage en taille S.

Fonction

A utiliser quand un petit espace est nécessaire entre les 4 points d'accroche et lorsque plusieurs sangles doivent être placées sur le même crochet du cintre.

..... 554259

58



58
Cintre de levage GH, 4 points d'accroche, x-small, 350 kg

Pour les personnes utilisant un harnais de levage en tailles Enfants et XS.

Fonction

A utiliser quand un petit espace est nécessaire entre les 4 points d'accroche et lorsque plusieurs sangles doivent être placées sur le même crochet du cintre.

..... 554260

Options pour les cintres de levage



59



60



61

59

Cintre de levage GH en croix, 500 kg

Adapté lorsqu'un grand espace est nécessaire entre les lanières avant et arrière du harnais. A utiliser lors des levages avec les modules de levage GH3+ et GH3 Twin.

..... 550800

60

Cintre de levage GH en croix, 250 kg

Adapté lorsqu'un grand espace est nécessaire entre les lanières avant et arrière du harnais. A utiliser lors des levages avec les modules de levage GH3+ et GH3 Twin.

..... 554904

61

Cintre en H, 350 kg, GH3

Adapté au levage de personnes pour lesquelles un grand espace est nécessaire entre les lanières avant et arrière du harnais. Par exemple pour le levage de personnes avec un grand abdomen.

Le cintre en H est disponible avec des cintres latéraux en 3 tailles différentes.

Cintre en H – Cintre central 550443
(comprend 1 cintre 550316 et 2 Swing kit 554903)

NB : il est nécessaire de commander 2 cintres latéraux en plus, de taille x-small (550058), small (550057) ou standard (550316).

Options pour les cintres de levage



62
Mousqueton
 21160

63
Swing kit
 554903

64
Rangement pour cintre de levage GH
 550531
 Rangement pour cintre de levage GH,
 à 4 points d'accroche
 551329

65
Barre de liaison
 Options pour GH3 Twin qui permet
 d'utiliser différents cintres
 550544



Votre partenaire en logistique:
 moyens de réhabilitation
 équipement médical
 aide à domicile

Echallens
 021 881 13 13
 www.a-reha.ch